

국제 키트에 포함



SST 튜브 3개



LAV 튜브 3개



흰색 탑 튜브 2개



소변 컵 1개



Aptima 소변 1개



피펫 2개

환자 체크리스트


- 혈액을 채취하기 전에 젤 팩을 냉장 보관하십시오. (냉동 시 반드시 평평하게 눌러서 배송해야 합니다.)
- 모든 바이알과 용기의 유효 기간을 확인하십시오. (날짜가 지난 경우 사용하지 마십시오)
- 전체 이름, 생년월일 및 인구 통계가 올바른지 확인하려면 키트 상자 안에 있는 실험실 주문을 확인하십시오.
- 문서 및 젤 팩을 포함한 전체 키트를 약속 시간에 가져가십시오.
- 채취 1시간 전에 소변을 보지 마십시오.

서류

- 국제 키트 지침
- 견적 송장 및 통관 서한
- Fedex UN3373 배송 가방 및 FedEx 보라색 파우치
- FedEx 반품 라벨

수집 지침

1. 키트 내부의 실험실 주문을 확인하고 모든 환자 정보가 작성되고 올바른지 확인하십시오.
2. 모든 튜브와 용기에 환자의 이름과 성, 생년월일, 수집 날짜를 표시하십시오.
3. 키트 내부에 제공된 모든 튜브를 사용하여 혈액 샘플 채취를 시작하십시오.
4. 채집 후 SST 튜브 3개와 LAV 튜브 3개를 취하여 8~10회 뒤집어 혼합한다.
5. 원심분리기 최소 30분에서 1시간을 넘지 않도록 모든 튜브가 응고되도록 설정하십시오.
6. 1000-1300 G 또는 2200-2500 RPM에서 15분 동안 수집 후 1시간 이내에 원심분리합니다.
7. (1) SST 튜브를 취하고 최대 3ML의 혈청을 추출하고 "SERUM"이라고 표시된 흰색 상단 튜브로 옮깁니다.
8. (1) LAV 튜브를 취하고 최대 3ML의 혈장을 추출하고 "PLASMA" 라벨이 붙은 흰색 상단 튜브로 옮깁니다.
9. 소변 수집을 위해 환자에게 멸균 소변 컵에 최소 20-30ML의 소변을 요청하십시오.
10. CT/NG 검사가 필요한 경우 2ML의 소변을 컵에서 Yellow Aptima Tube로 옮깁니다. (옮긴 후 소변 컵을 버리십시오)

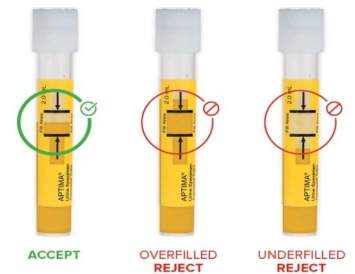

Aptima Tube: 검정색 선 사이만 채웁니다. 과충전 또는 미충전은 거부됩니다.

운송 지침

1. 모든 용기에 환자 이름, 생년월일 및 수거 날짜가 표시되어 있는지 확인하십시오.
2. 모든 튜브와 소변 샘플을 확인했으면 생물학적 위험 표본 가방에 넣습니다.
3. 젤 팩을 환자의 샘플과 함께 실버 버블 메일러에 넣고 닫습니다.
4. 실험실 주문이 제대로 작성되었고 모든 테스트가 명확하게 표시되어 있는지 확인하십시오.
5. 키트 상자에 환자 실험실 주문, 환자 샘플이 포함된 은색 버블 우편물을 넣고 닫습니다.
6. Pro Forma 인보이스는 환자 또는 클리닉이 완전히 작성하고 서명해야 합니다.
7. 반품 라벨, 견적 송장을 FedEx 보라색 파우치에 넣고 FedEx 팩 외부에 부착합니다.
8. FedEx 픽업 또는 드롭 오프를 준비하십시오. 참고: 픽업 전화 1-800-463-3339(1800-GO-FEDEX)