

INCLUIDO EN KIT INTERNACIONAL



3 tubos SST



3 tubos LAV



2 tubos blanca



1 recipiente para orina



1 orina Aptima 2 pipetas

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PACIENTE


- Refrigere los paquetes de gel antes de la extracción de sangre. (DEBE quedar plano cuando se congela para el envío).
- Verifique las fechas de vencimiento en todos los viales y contenedores. (NO usar si la fecha ha expirado)
- Verifique el pedido de laboratorio dentro de la caja del kit para confirmar que el nombre completo, fecha de nacimiento y datos demográficos son correctos.
- Asegúrese de llevar el kit completo, incluidos los documentos y los paquetes de gel, a su cita.
- No orinar 1 hora antes de la recolección.

DOCUMENTOS

- Instrucciones del kit internacional
- Factura proforma y cartas de despacho de aduana
- Fedex UN3373 Bolsa de envío y bolsa morada de FedEx
- Etiqueta de devolución de FedEx

INSTRUCCIONES DE RECOLECCIÓN

1. Verifique el pedido de laboratorio dentro del kit y confirme que toda la información del paciente esté completa y sea correcta.
2. Etiquete todos los tubos y recipientes con el nombre y apellido del paciente, fecha de nacimiento y fecha de recolección.
3. Comience la recolección de muestras de sangre utilizando todos los tubos provistos dentro del kit.
4. Después de la recolección, tome 3 tubos SST y 3 tubos LAV y mézclelos invirtiéndolos de 8 a 10 veces.
5. Deje que todos los tubos se coagulen al menos 30 minutos pero no más de 1 hora antes de la centrifugación.
6. Centrifugar a 1000-1300 G o 2200-2500 RPM durante 15 minutos y dentro de 1 hora de la recolección.
7. Tome (1) tubo SST y extraiga un máximo de 3 ml de suero y transfíralo al tubo superior blanco con la etiqueta "SERUM".
8. Tome (1) tubo LAV y extraiga un máximo de 3 ml de plasma y transfíralo al tubo superior blanco con la etiqueta "PLASMA".
9. Para la recolección de orina, solicite a los pacientes un mínimo de 20-30 ML de orina en una taza de orina estéril.
10. Si se requiere una prueba CT/NG, transfiera 2 ml de orina de la taza al tubo amarillo Aptima. (Por favor, deseché la taza de orina después de la transferencia)

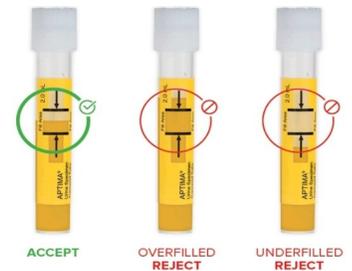

Tubo Aptima: llene solo entre las líneas negras. Se rechazará el sobrellenado o el llenado insuficiente.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

1. Asegúrese de que todos los contenedores estén etiquetados con el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y fecha de recolección.
2. Una vez que haya revisado todos los tubos y las muestras de orina, póngalos dentro de la bolsa de muestras de riesgo biológico.
3. Agregue paquetes de gel en el sobre de burbujas plateado con las muestras de los pacientes y cierre.
4. Asegúrese de que la orden de laboratorio se complete correctamente y que todas las pruebas estén claramente marcadas.
5. Agregue el pedido de laboratorio del paciente, el sobre de burbujas plateado con las muestras de los pacientes en la caja del kit y cierre.
6. La factura Pro Forma DEBE ser completada en su totalidad y firmada por el paciente o la clínica.
7. Agregue la etiqueta de devolución, la factura proforma en la bolsa morada de FedEx y péguela en el exterior del paquete de FedEx.
8. Organice la recogida o entrega de FedEx. Nota: Para recoger llame al 1-800-463-3339 (1800-GO-FEDEX)