

包含在国际套件中



3 个 SST 管



3 个 LAV 管



2 个白顶管



1 个尿杯



1 个 Aptima 尿液 2 个移液器

患者检查清单


- 抽血前冷藏凝胶包。（冷冻运输时必须平放。）
- 检查所有小瓶和容器的有效期。（过期请勿使用）
- 检查试剂盒内的实验室订单，确认全名、出生日期和住址信息正确。
- 请务必携带整个套件（包括文件和凝胶包）前往预约。
- 收集前 1 小时请勿排尿。

文件

- 国际套件说明
- 形式发票和清关函
- FedEx UN3373 运输袋和 FedEx 紫色袋
- 联邦快递退货标签

领取须知

1. 检查试剂盒内的实验室订单并确认所有患者信息均已填写且正确。
2. 在所有试管和容器上贴上患者姓名、出生日期和采集日期的标签。
3. 开始使用套件内提供的所有试管收集血液样本。
4. 收集后，取3个SST管和3个LAV管，颠倒8-10次混合。
5. 离心前让所有管子凝固至少 30 分钟但不超过 1 小时。
6. 收集后 1 小时内以 1000-1300 G 或 2200-2500 RPM 离心 15 分钟。
7. 取 (1) 个 SST 管，最多提取 3ML 血清，并转移至标有“SERUM”的白顶管中。
8. 取(1) LAV 管并提取最多3ML 血浆并转移至标有“PLASMA”的白顶管中。
9. 对于尿液收集，要求患者将至少 20-30 毫升的尿液放入无菌尿杯中。
10. 如果需要 CT/NG 测试，将 2ML 尿液从杯子转移到黄色 Aptima 管中。（转移后请丢弃尿杯）

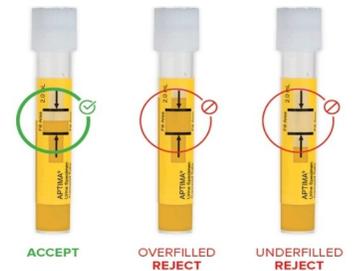

Aptima Tube: 仅在黑线之间填充。填充过多或填充不足将被拒绝。

运输说明

1. 确保所有容器都贴有患者全名、出生日期和收集日期的标签。
2. 检查完所有试管和尿液样本后，将它们放入生物危害标本袋中。
3. 将凝胶包与患者样本一起添加到银色气泡邮袋中并关闭。
4. 请确保正确填写实验室订单并清楚标记所有测试。
5. 将患者实验室订单、装有患者样本的银色气泡邮件放入试剂盒中并关闭。
6. 形式发票必须完整填写并由患者或诊所签名。
7. 将退货标签、形式发票添加到 FedEx 紫色袋中，并将其贴在 FedEx 包装的外部。
8. 安排联邦快递取件或投件。注意：如需取件，请致电 1-800-463-3339 (1800-GO-FEDEX)